

超音波治療器【オクルスファイン】は厚生労働省に承認された眼科用の医療機器です。

視力の悩みを解決する！ 視力は戻るんです。

簡単治療！
まぶたを閉じて
軽く当てるだけ！

視力回復

管理医療機器： **OCULUS FINE**
一般的名称：超音波治療器
販売名： **オクルスファイン**



超音波治療法

超音波治療法は目にやさしい縦波振動の超音波が目の深層部までマイクロマッサー作用を及ぼし、毛様体筋の毛細血管が拡張して目の血流量が増大筋肉の緊張を緩和し、偽近視（仮性近視）を抑制、または緩解（症状の軽減緩和）に効果があるとされてます。

やさしさ最新機能


治療される方のために「やさしさ」をテーマとし自社設計にこだわり、「人間工学」に基づいた、数々の最新機能を搭載しました。

1 いつも使うものだから
5Way 可変ハンドル

2 地球にやさしい 充電式。
エコ・チャージ設計



オクルスファインの超音波治療

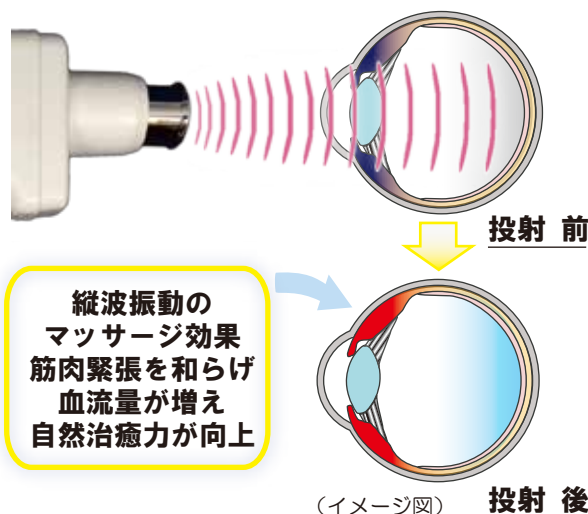

超音波治療器【オクルスファイン】仕様



- 一般的名称：超音波治療器
- 販売名：オクルスファイン
- 承認番号：22600BZX00241000
- 電気的入力：DC6V 80～100mA
- 音響出力：100mW/cm² ±10%
- 発振周波数：約6～12kHz(多重波重合超音波)
- 重量：約320g(充電電池含む)
- 寸法：約長さ188mm×高さ166mm×幅51mm
(取っ手収納時 高さ約95mm)
- 効果効果：「偽近視の抑制又は緩解」

1日1回 片目に10~15分間投射。

両眼を軽く閉じて、片方の眼に直接導子の頭面を軽く密着させるように当て、投射して下さい。

※隔日、「左右」「交互」に使用するとより効果が得られます。

※離したり角度が悪いと正しい効果が得られません。

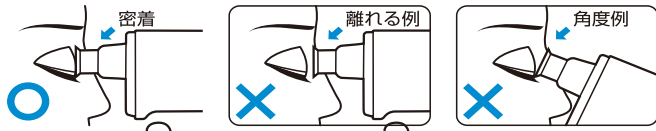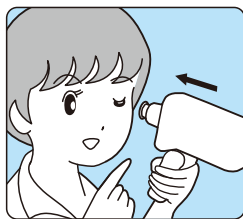

家族みんなで使って、健康生活。

■ こんな方々に最適です。■

- ・眼鏡やコンタクトを使用している
- ・同じ姿勢で長時間パソコン等を使う方
- ・スマートフォン、ゲームを長時間使用する
- ・ピントが合うのに時間がかかる方
- ・細かい作業をしている方
- ・最近、目がしょぼつく事がある

オクルスファインの最新機能


治療される方のために「やさしさ」をテーマとし自社設計にこだわり「人間工学」に基づいた、数々の最新機能を搭載しました。

■「やさしく」、「疲れにくい」を研究し、より効果的な治療を可能する。

1 5Way 可変ハンドル いつも使うものだから

簡単操作

どなたにも、
使いやすく
疲れにくい

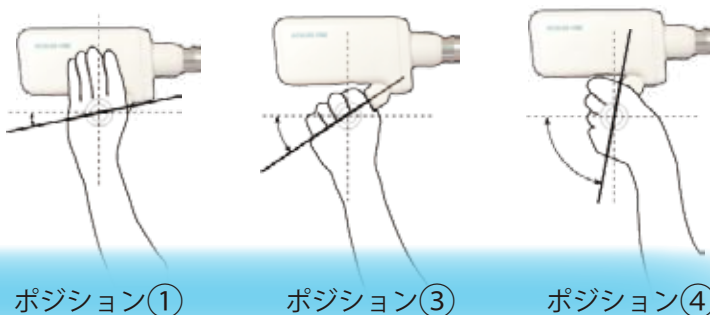

2 エコ・チャージ設計 地球にやさしい 充電式。

低電力設計で地球にもやさしい。家計にも優しい、充電式で繰り返し使える。一回の充電で長期間使える、家族旅行にも便利！

■ 大容量バッテリー（高性能充電電池使用）搭載

乾電池不要



充電動作時



充電完了時

3 ソフト ランプ設計 人に「やさしく」がテーマ。

電源ランプ・充電ランプは、各動作時のみ、内部から「やさしく “ひかる”」浮び上る。



【梱包品】

本体、専用ケース、専用充電器、添付文書取扱説明書（保証書付）

一般的名称：超音波治療器

販売名：オクルスファイン

医療機器承認番号：22600BZX00241000

お問い合わせ ご用命は

4 コンパクトデザイン 家族旅行にも便利

ハンドル（可変式取っ手）が折りたため、オフィスや外出時の携帯性に優れています。

安全上のご注意 ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 注意

- 偽近視か近視かは専門医によらねばわかりません。視力が低下したら先ず専門医の診断を受けましょう。
- コンタクトレンズやメガネは必ずはずしてご使用下さい。
- 眼に当てた状態でスイッチを入れたり、切ったりする行為は過度電流による刺激や機器の不具合を招きますので、絶対に行わないで下さい。
- 寝ながらの投射や、読書・テレビを見ながら・・・という、「何々しながらの投射」はしないでください。
- 電池を充電する場合は、専用の充電器をご使用ください。既製の充電器では、正常に充電されず、本機の性能を維持できませんので、使用しないでください。
- 本器使用中に万一異常が発生した場合は即使用を中止し、販売店に連絡の上専門医の指示に従って下さい。
- ご自身による分解、修理等はしないで下さい。故障の原因になります。